

eAdvantage[®]

Analgesic Gas Mixing and Delivery System



Teie tõhususe, täpsuse ja töökindluse standardeid on just värskendatud.



eAdvantage[®]

Analgesic Gas Mixing and Delivery System



O-Two™ eAdvantage[®] tehnoloogia on enneolematu. Selle võimet tarnida patsiendile täpselt vajalik kogus gaasi ilma jääme- ega keskkonnaohtudeta ei leidu ühestki teisest turul pakutavast valuvaigistist.

Gaasivoolu vajadust reguleerib patsiendi spontaanne hingamine, vältides seega gaasi raiskamist. Veelgi enam, see funktsioon jätab tervishoiuteenuste osutajate pideva tähelepanu kõrvale. võimaldades neil keskenduda kõigile muudele vajadustele, mida patsient võib vajada.



Andmehaldus

Andmete logimise ja edastamise võimalus (USB-sünkroonimispordi kaudu) suurendab tootlikkust ja teabe jagamist, mille tulemuseks on vähem seisakuid tervishoiuteenuse osutaja jaoks ja patsiendi hooldus paraneb.

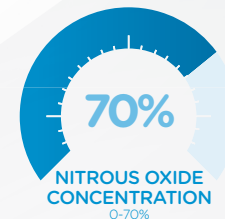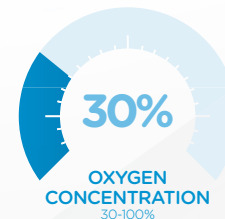

Dilämmastikoksiid ja Hapniku kontsentratsioon

Muutuva gaasi kontsentratsioon tagab patsiendile tõhusaks tiitrimiseks analgeesia nõuded.



Spetsiaalselt loodud valu leevendamiseks hädaolukordade, sünnituse või valulike protseduuride ajal.

Uus eAdvantage®, mis on mõeldud haiglasiseseks kasutamiseks (eraabi, sünnitus ja sünnitus, kliinikud jne), pakub teadvusel, spontaanselt hingavale patsiendile vajaduse korral muutuvat dilämmastikoksiidi ja hapniku segu, et leevendada sünnitusest tingitud valu, trauma või muud seisundid, mille puhul on inhaleeritav analgeesia kliiniliselt täpsustatud. See nõuab ainult kinnitamist reguleeritud meditsiinilise hapniku ja dilämmastikoksiidi gaasivarustuse (seinakontakti või silindrite), elektrivarustuse või aku külge ning patsiendi vooluringi kinnitamist suuosa või näomaski ja puhastusvoolikuga, et see oleks kasutusvalmis.

Lihtsad juhtseadised ja arvukad turvafunktsioonid muudavad selle ideaalseks seadmeks tiitritava analgeesia täpseks manustamiseks sünnituse, trauma või valulike protseduuride ajal.



GAASI VÄLJUND & SEIREPORT

Patsiendi väljundport sega-gaaside jaoks. Seireport võimaldab täpset ja tundlikku jälgimist.

TOITELAADIJA PISTIK

Meditsiinilise kvaliteediga pistik turvaluku mehhanismiga.

HAPNIKKU & DILÄMMASTIKOKSIIDI SISENDID

Mittevahetatavad pöörlevad sisendühendused pöörlevad, et neid hõlpsalt teie vajadustega kohandada. Sisendrõhu vahemik 50 kuni 70 PSI.

Gaasiallikas	Kokkusurutud hapnik + dilämmastikoksiid
Vooluahela juhtimisallikas	Elektrooniline
Pneumaatiline ahel Gaasikulu (L/min)	0.00
Maksimaalne voolukiirus (L/min)	>260 kombineeritud või 160 ainult hapniku sisendist
Oxygen concentration (O ₂ %)	30-100 % continuous adjustment with 5% incremental changes
Päästiku tundlikkus (cm H ₂ O)	- 1,0 (mittereguleeritav)
Sisendrõhu vahemik (PSI)	50-70
Sissehingamise takistus (cm H ₂ O)	0 kuni -6
Väljahingamise takistus (cm H ₂ O)	0 kuni 6
Puhastamise voolukiirus (L/min)	40 (hapnik)
Töötemperatuur (°C)	5 kuni 40
Säilitustemperatuur (°C)	-20 kuni 60
Seadme hädaolukorra väljalülitamine	alla 35 PSI O ₂ sisendi
Aku	liitiumioon (01CV9200) Tööaeg 15-24h
A/C toiteadapter	100-250V / 4,74A
Ekraan	4,3" värviline TFT
Andmete salvestamine ja edastamine	Jah
USB	Jah (andmeedastuse ja tarkvara värskendamise jaoks)

Otseülekanne	Ainult alarmid ja seadistus
Parameetri sätted	Juhtnupp
Lukustusklahvi funktsioon	Jah pääsukoodiga
Mõõtmed (mm)	305 x 210 x 130
Kaal koos ja ilma akuta (KG)	2.80 & 2.20

Äratused (Visuaalne ja kuuldav)

Kõrge, madal või puudub sisendgaasi toiterõhk
 Madal akutase
 Tolerantsusest väljas gaasisegu
 Seadme rike

Klapid lekivad
 Teeninduseks tagastamine
 Helihäire sagedus
 Kuuldav vaikus

Tellimisinfo

01EQ3000	eAdvantage® reguleeritav valuvaigistava gaasi segamis- ja kohaletoimetamissüsteem koos toitevoolikutega (c/w DISS O ₂ ja N ₂ O), ühekordselt kasutatav patsiendiahel puhastusvoolikuga ja adapteriga koos huulikuga	Iga
01CV8037-CS	Ühekordselt kasutatav patsiendi ahel puhastusvooliku, jälgimisliini ja adapteriga koos huulikuga	Juhtum/10
02RT1303	Ühekordselt kasutatav huulik (individuaalselt pakitud)	Juhtum/50
02FM4999-CS	O-Two universaalne mask	Juhtum/12

SELLEL TOOTEL ON KAHEAASTANE GARANTII TOOTJAPUOLSETE DEFJEKTIDE VASTU.

o_two controlled
ventilation™

www.otwo.com

45A Armthorpe Road, Brampton, ON, Canada, L6T 5M4

Telefon: +1 905 792-OTWO (6896) N.A. Tasuta: +1 800 387 3405

Faksimile: +1 905 799 1339 Email: resuscitation@otwo.com

CE 1639
Rev 1 JUL 22

EC REP

MedNet EC-REP GmbH | Borkstrasse, 10
48163 Münster, Germany

eAdvantage®
Analgesic Gas Mixing and Delivery System