

eAdvantage[®]

Analgesic Gas Mixing and Delivery System



Dine standarder for effektivitet, præcision og pålidelighed er netop blevet opdateret.



eAdvantage[®]

Analgesic Gas Mixing and Delivery System


O-Two™ eAdvantage®-teknologien er uden fortilfælde. Dens kapacitet til at levere den nøjagtige mængde gas, der er nødvendig for patienten, uden hverken affald eller miljøfare, kan ikke findes i nogen anden analgesi, der er tilgængelig på markedet.

Behovet for gasstrøm reguleres af patientens spontane åndedræt, som følgelig forhindrer gasspild. Desuden afviser denne funktion den konstante opmærksomhed fra sundhedsudbydere, gør dem frie til at fokusere på alle de andre behov, patienten måtte have behov for.



Datastyring

Muligheden for datalogning og overførsel (via USB-synkroniseringsporten) øger produktiviteten og informationsdelingen, hvilket resulterer i mindre nedetid for sundhedsudbyderen og forbedret pleje af patienten.

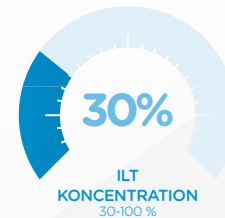

Dinitrogenoxid og Iltkoncentration

Variabel gaskoncentration giver for effektiv titrering til patienten krav til analgesi.



Specielt designet til smertelindring under nødsituationer, fødsel eller smertefulde procedurer.

Den nye eAdvantage®, der er designet til brug på hospitalet (erhvervsafdeling, fødsel, klinikker osv.), giver en variabel blanding af lattergas og ilt, efter behov, til en bevidst, spontant vejrtrækningspatient til lindring af smerter forårsaget af barnet, fødsel, traumer eller andre tilstande, hvor inhalationsanalgesi er klinisk specificeret. Det kræver kun tilslutning til trykregulerede medicinske ilt- og dinitrogenoxidgasforsyninger (vægudtag eller cylindre), elektrisk forsyning eller batteri og tilslutning af et patientkredsløb med mundstykke eller ansigtsmaske og renseslange for at være klar til brug.

Simple kontroller og rigelige sikkerhedsfunktioner gør dette til den ideelle enhed til nøjagtig levering af titrerbar analgesi under veer, traumer eller smertefulde procedurer.



GASUDGANG & OVERVÅGNINGSHAVN

Patientudgangsport til blandede gasser. Overvågningssport muliggør præcis og følsom overvågning.

STRØMOPLADER STIK

Medicinsk stik med sikkerhedslåsemekanisme.

ILT OG LATTERGAS INPUT

De ikke-udskeftelige drejeindgangsforbindelser roterer for nemt at justere til dine behov. Indgangstrykkræde fra 50 op til 70 PSI.

Gas kilde	Komprimeret ilt + dinitrogenoxid
Kredsstyringskilde	Elektronisk
Pneumatisk kredsløb Gasforbrug (L/min)	0.00
Maksimal flowhastighed (L/min)	>260 kombineret eller 160 kun fra ilttilførsel
Iltkoncentration (O ₂ %)	30-100 % kontinuerlig justering med 5 % trin- vise ændringer
Triggerfølsomhed (cm H ₂ O)	- 1.0 (ikke justerbar)
Indgangstrykområde (PSI)	50-70
Indåndingsmodstand (cm H ₂ O)	0 til -6
Udåndingsmodstand (cm H ₂ O)	0 til 6
Rensningsflow (L/min)	40 (Oxygen)
Driftstemperatur (°C)	5 to 40
Relativ fugtighed	15 % til 95 %
Opbevaringstemperatur (°C)	-20 til 60
Nødstop for enhed	Under 20 PSI O ₂ -indgang Under 25 % O ₂ -udgang med 3 på hinanden følgende vejrtrækninger eller under 21 % O ₂ -udgang med det samme Sensor- og/eller ventilfejl
Batteri	Li-Ion (01CV9200) Drifttid 15-24 timer
Display	Ja
USB	Ja (til dataoverførsel og softwareopdatering)

Live overvågning	Kun alarmer og indstilling
Parameterindstillinger	Kontrolknop
Lås tast funktion	Ja med adgangskode
Dimensioner (mm)	305 x 210 x 130
Vægt med & uden batteri (Kg)	2.80 & 2.20

Alarmer (Visuel og hørbar)

Højt, lavt eller intet input gasforsyningstryk
 Lavt batteri
 Ude af tolerance gasblanding
 Enhedsfejl

Ventillækage
 Returner til service
 Hørbar alarmfrekvens
 Hørbar stilhed

Bestillingsinformation

01EQ3000	eAdvantage® justerbart analgetisk gasblandings- og leveringssystem med forsyningslanger (inkl. DISS O ₂ og N ₂ O), engangs patientkredsløb med scavengerslange og adapter med mundstykke	Hver
01CV8037-CS	Engangs patientkredsløb med scavengerslange, monitoreringslange og adapter med mundstykke	Kasse/10
02RT1303	Engangs mundstykke (individuet indpakket)	Kasse/10
02FM4999-CS	O-Two universel maske	Kasse/112
01EA6004	eAdvantage-vogn med 4 flaskeholdere	Hver

DETTE PRODUKT HAR TO ÅRS GARANTI MOD PRODUCENTFEJL

o_two controlled™
ventilation

www.otwo.com

45A Armthorpe Road, Brampton, ON, Canada, L6T 5M4

Telephone: +1 905 792-OTWO (6896) N.A. Toll Free: +1 800 387 3405

Facsimile: +1 905 799 1339 Email: resuscitation@otwo.com

CE 1639

Rev 4 MAR 26

EU REP

MedNet EC-REP Ilb GmbH Borkstrasse, 10
48163 Münster, Alemania

Leveret af 

eAdvantage®
Analgesic Gas Mixing and Delivery System